

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Dali-Serie



Die Pflegebetten
für die digitale Zukunft

Dali – die Bettenserie für die Zukunft der Pflege

Die häusliche Pflege ist das Fundament der Pflege in unserer Gesellschaft. Deshalb spielt die technische Weiterentwicklung der Pflegehilfsmittel eine entscheidende Rolle. Ihre immer leichtere Bedienbarkeit und die Vernetzung durch digitale Assistenzsysteme können Belastungen mildern, die durch den Pflegekräftemangel und die soziale Isolation vieler alter Menschen entstehen.

Unsere Dali-Bettenserie prägt die häusliche Pflege in Deutschland und Europa seit Jahren. Jetzt stellen wir die Weichen in die Zukunft. Mit digitaler Steuerung und Vernetzung durch Apps sowie dem praktischen Montagesystem Easy Click entlasten unsere Dali-Modelle die Mitarbeiter des Sanitätshauses ebenso wie die Pflegenden zuhause oder in Heimen.

Mit Dali-Betten von Burmeier genießen Bewohner und Pflegendе viel Komfort, können in der vertrauten häuslichen Umgebung leben und sich rundum sicher fühlen. Der Fachhandel profitiert von schnellem Aufbau, optimaler Hygiene durch eine validierte maschinelle Aufbereitung und der digitalen Vernetzung.

Der Name Dali steht jetzt und in Zukunft für Betten, denen die Menschen vertrauen.

Dali



- **Höhenverstellung:**
40 – 80 cm
- **Wirtschaftlich, wohnlich und sicher:**
 - sekundenschnelle Montage der Seitensicherungen mit Easy Click
 - kabelloser Handschalter
 - digitale Vernetzung durch die App zum Bett

Dali wash



- **Höhenverstellung:**
40 – 80 cm
- **Maschinell waschbar für ideale Hygiene:**
 - KTL-Beschichtung schützt vor Korrosion
 - Schutz und Entlastung für Sanitätshauspersonal und die häusliche Pflege
 - Reduzierung der Prozesskosten durch Automatisierung und schnellen Wiedereinsatz


Dali low-entry



- **Höhenverstellung:**
23 – 63 cm
- **Niedrigbett zur Sturzprophylaxe:**
 - niedriger Einstieg von nur 23 cm schützt vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen
 - Seitensicherungen mit Easy Click
 - digitale Vernetzung durch die App zum Bett

Inhalt

2	Modellvarianten
4	Dali
6	Dali wash
8	Dali low-entry
10	Easy-Click-System
12	Kabelloser Handschalter
14	Dali-Lock-App
16	24-Volt-Antriebssystem
18	Softcover
20	Zubehör
24	Technische Daten
26	Die Stieglmeyer-Gruppe

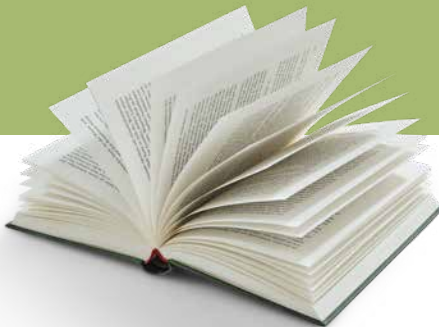



Dali

Schnell und digital



Das Dali verdankt seinen Erfolg als Deutschlands meist-verkauftes Pflegebett seiner zukunftsweisenden Technik und Langlebigkeit. Es ist ein robustes und wartungsarmes Bett, hergestellt aus hochwertigen Materialien.


Die 4-geteilte Liegefläche lässt sich bequem mit einem **kabellosen Handschalter** bedienen, der sich per Bluetooth mit dem Bett vernetzt. Dabei ist dank der Fußtieflage standardmäßig eine gesundheitsfördernde **Sitzposition** zum Essen oder Fernsehen möglich. Möchte der Pflegenden bestimmte Positionen für den Bewohner sperren, kann er dies mithilfe des Handschalters oder noch bequemer mit der kostenlosen Dali-Lock-App auf seinem Smartphone erledigen.

Die durchgehende Seitensicherung rastet mit dem **Easy-Click-System** einfach an vormontierten Halterungen ein. Dadurch wird der Aufbau des Bettes erheblich leichter.

Starke Vorteile

- sichere Arbeitslast von 185 kg
- Bremstritte mit angenehmer Haptik, auch in Hausschuhen oder Socken bedienbar
- kabelloser Handschalter mit sehr langem Einsatzzyklus, geringerer Serviceaufwand für alle Bediener des Bettes
- einfacher und schneller Aufbau durch das Easy-Click-System
- Unterschenkellehne bei allen Dali-Modellen optional anstellbar – der dazu benötigte Rastomat ist als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

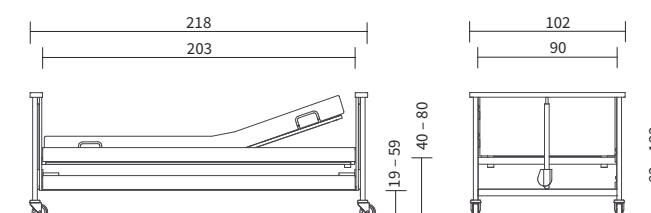

Produktbesonderheiten:



◀ Mit dem kabellosen Handschalter können Bewohner und Pflegenden das Bett mühelos bedienen.

▲ Die bequeme Sitzposition erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten.

▼ Die Bremsen lassen sich auch mit Hausschuhen angenehm bedienen.

▼ Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit Easy Click werkzeuglos anbringen und abnehmen.



▲ Alle Motoren lassen sich werkzeuglos entnehmen. Der entnehmbare integrierte Motorschutz verhindert Beschädigungen.



Eine sichere Hygiene und der Kampf gegen multiresistente Keime stehen auch in der Pflege zuhause immer mehr im Mittelpunkt. Maschinenwaschbare Betten bieten hier starke Vorteile. Sie gewährleisten eine **ideale Reinigung und Desinfektion** durch validierbare Prozesse. Gleichzeitig sparen sie dem Betreiber Zeit und Kosten, da die aufwendige und kräftezehrende manuelle Aufbereitung durch die Mitarbeiter des Sanitätshauses entfällt. Das Bett ist schneller wieder einsatzbereit und vermeidet dadurch unnötige Standzeiten.

Das Dali wash wurde für die Reinigung in Waschanlagen konzipiert. Durch seinen hohen **Schutzgrad IPX6** kann das Bett ohne Demontage des Antriebssystems aufbereitet werden. Durch seine **KTL-Beschichtung** von außen und innen ist das Bett gegen Korrosion geschützt. KTL steht für „kathodische Tauchlackierung“, ein elektrochemisches Lackierverfahren für höchste Beständigkeit. Bohrungen sorgen dafür, dass Restflüssigkeit nach dem Waschvorgang vollständig abfließen kann.

Starke Vorteile


- sichere Arbeitslast 185 kg
- durchgehende Seitensicherung mit Easy-Click-System
- kabelloser Handschalter
- Fußtieflage inklusive

Besonders hoher Hygienestandard

Dali wash

Das Bett für eine optimale Hygiene

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

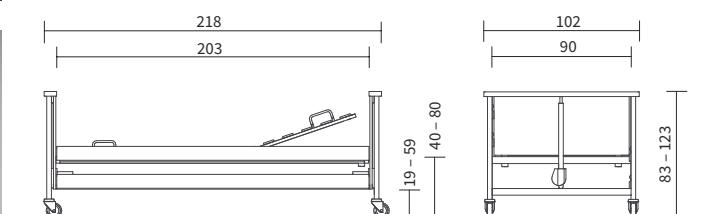

Produktbesonderheiten:



▲ Die KTL-Beschichtung schützt das Bett innen und außen vor Korrosion.

▲ Bohrungen in den Metallprofilen lassen Restflüssigkeit abfließen.

▲ Kunststoff-Stopfen mit Bohrungen ermöglichen den Austritt von Restfeuchtigkeit.

▲ Versiegelte Oberflächen eignen sich ideal für eine sichere, gründliche Reinigung.

▲ Die 4-geteilte Liegefläche besitzt hygienische Metallstreben.



Einstiegshöhe
von nur 23 cm
zur Sturz-
prophylaxe



Dali low-entry

Das Niedrigbett


Die niedrige Höhe reduziert das Risiko ▶
von Sturzverletzungen.

Seitensicherungen schützen vor Stürzen – doch wenn sie permanent hochgezogen werden, kann diese freiheitsentziehende Maßnahme die Lebensqualität des Pflegebedürftigen senken. Eine hervorragende Alternative sind **Niedrigbetten** wie das Dali low-entry. Mit seinem Höhenverstellbereich von **23 bis 63 cm** befindet es sich in der tiefsten Position dicht über dem Fußboden. Aus dieser niedrigen Höhe ist das Verletzungsrisiko des Bewohners im Fall eines Sturzes viel geringer. Das erleichtert die Entscheidung, auf Seitensicherungen zu verzichten. So folgt Burmeister der Philosophie des **Werdenfeller Weges**, die Mobilität des Bewohners zu erhalten.

Darüber hinaus profitiert das Dali low-entry von den Vorteilen der Dali-Familie wie serienmäßiger Fußtieflage, kabellosem Handschalter und zusätzlicher Sperrung per App.



Außenmaße/Höhenverstellbereich:

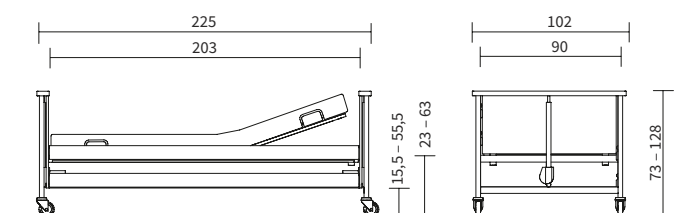

Starke Vorteile

- sichere Arbeitslast 175 kg
- stufenlose Höhenverstellung für ergonomisch angenehmen Ein- und Ausstieg
- 24-Volt-System – keine Ableitstrommessung über die zu erwartende Nutzungsdauer hinaus

Produktbesonderheiten:





Das Easy-Click-System

- ▲ Mit Easy Click lassen sich die Holme der Seitensicherung sekundenschnell anbringen und wieder abnehmen.

Die durchgehende Seitensicherung der Dali-Serie ist leicht zu bedienen und bietet viel Schutz. Jetzt ist auch ihre Montage noch viel einfacher geworden. Mit dem Easy-Click-System lassen sich die 4 Holme **sekundenschnell anbringen** oder wieder abnehmen. Zugleich sind sie so sicher und stabil befestigt, dass selbst unruhige Pflegebedürftige jederzeit geschützt sind und die Seitensicherung nicht unbeabsichtigt entfernen können.

In den Kopf- und Fußteilen aller Dali-Betten sind bereits Halterungen vormontiert. Die Holme der Seitensicherung werden einfach daran „festgeklickt“ und rasten sicher ein. Möchte man sie wieder abnehmen, drückt man auf kleine **Entriegelungsschalter** in den Halterungen. Diese Knöpfe sind so angebracht, dass der Bewohner die Seitensicherung nicht versehentlich abnehmen kann. Die Stirnseiten der Holme sind durch elegante anthrazitfarbene Kunststoffkappen geschützt.

Das Easy-Click-System erleichtert Sanitätshausmitarbeitern, pflegenden Angehörigen oder Pflegeheimtechnikern die Montage der Betten erheblich und **spart viel Zeit**. Zugleich kann der Pflegenden die Seitensicherung abnehmen, wenn der Bewohner sie nicht benötigt. Eine praktische Tasche für Transport und Lagerung der Holme ist als Zubehör erhältlich.



- ▲ Die durchgehende Seitensicherung bietet optimalen Schutz.

Leicht montiert



- ▲ Der Aufnahmemechanismus für die Seitensicherung ist bereits vorinstalliert. Das spart viel Zeit beim Aufbau. Ohne Seitensicherung verbleiben die Aufnahmen unauffällig in unterster Position am Bett.



- ▲ Bei diagonalen Anstellung geben die Holme dem Pflegebedürftigen eine gute räumliche Orientierung.



Der kabellose Handschalter

▲ Der kabellose Handschalter lässt sich intuitiv bedienen.

Ein elektrisch verstellbares Bett mit Handschalter bietet höchsten Komfort. Doch die übliche Befestigung des Bedienteils mit einem Kabel am Bett hatte auch Nachteile. Das Kabel war eine potenzielle Stolperfalle, zog Staub an und wurde bei Kollisionen zuweilen beschädigt. Daher haben wir für die Dali-Serie einen neuen kabellosen Handschalter konstruiert, der sich **per Bluetooth** mit dem Bett verbindet.

Sowohl Bewohner als auch Pflegende gewinnen dadurch sehr hohen Bedienkomfort und haben das Bedienteil immer dort zur Hand, wo sie es benötigen. Wie bisher findet der Handschalter seinen Platz an der Seitensicherung, sodass er jederzeit griffbereit ist.

Der Handschalter verfügt mit handelsüblichen Batterien über einen **sehr langen Nutzungszyklus** und zeigt einen fälligen Batteriewechsel rechtzeitig per Lichtsignal an. Die Batterie lässt sich werkzeuglos durch einen Verschluss auf der Rückseite einsetzen.

Wie gewohnt kann der Pflegende am Handschalter alle Verstelloptionen einzeln für den Bewohner sperren oder wieder entsperren. Dazu muss man den beigegefügt Magneten auf das Bedienfeld legen und die Taste der zu sperrenden Funktion drücken. Noch komfortabler geht dies mit der Dali-Lock-App.

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Kabellose Bedienung

- leichte Bedienung im und außerhalb des Bettes, keine Einschränkung durch vorgegebene Kabellängen
- sehr leicht verständliche und kontrastreiche Piktogramme erleichtern die Bedienung
- Handschalter lässt sich frei an der Seitensicherung positionieren
- bei einer täglichen Bediendauer von 140 Sekunden reicht die Kapazität der Batterie 2 Jahre lang



Ein fälliger Batteriewechsel wird rechtzeitig per Lichtsignal angezeigt.



▼ Die handelsübliche Batterie lässt sich in wenigen Sekunden auswechseln.




▲ Die Verstellfunktionen des Bettes lassen sich mithilfe eines Magneten einzeln sperren und entsperren.

Der Handschalter lässt sich an die Seitensicherung hängen und ist jederzeit griffbereit.





▲ Mit der Dali-Lock-App lassen sich die Verstellfunktionen des Bettes bequem verwalten.

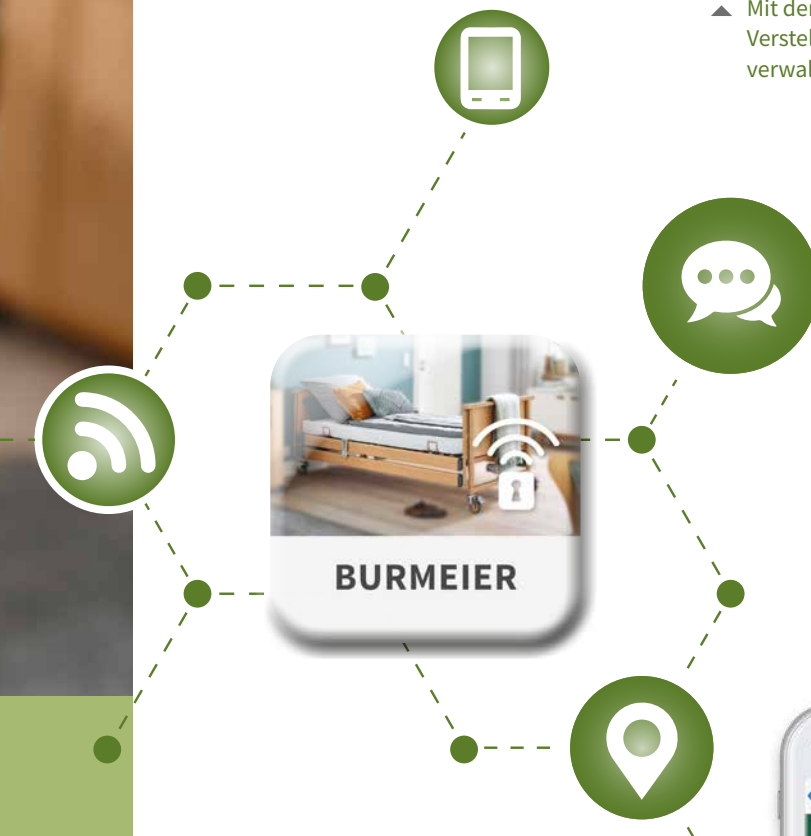

Die Dali-Lock-App

Sicherheit digital gestalten

Durch die vielen Verstellmöglichkeiten der Liegefläche sind unsere Dali-Betten komfortabel und flexibel. Doch je nach Gesundheitszustand des Bewohners sind bestimmte Positionen vielleicht nicht empfehlenswert. Möchte der Pflegeverantwortliche zum Beispiel die Fußtieflage oder das Anstellen der Rückenlehne sperren, hilft ihm dabei unsere **Dali-Lock-App**. Diese App ist für Android- und Apple-Smartphones geeignet und lässt sich aus den bekannten Stores kostenlos herunterladen.

Die Dali-Lock-App findet das Pflegebett automatisch und verbindet sich mit ihm, indem Sie den Code auf der Rückseite des

Handschaters scannen. Nun können Sie alle Funktionen einzeln anhand einfacher Piktogramme sperren oder entsperren.

Die Dali-Lock-App ist Teil einer **umfassenden digitalen Vernetzung** bei Burmeier. Besuchen Sie unsere Internetseite www.burmeier.com, um Neuigkeiten über weitere Apps und den modernen Bettenkonfigurator zu erfahren.

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN *Die Dali-Lock-App*

- Laden Sie die App Dali-Lock kostenlos aus dem Store für Ihr Android- oder Apple-Smartphone herunter.
- Starten Sie den Bettensuchvorgang. Die App findet Ihr Dali.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Bett, indem Sie den Code auf der Rückseite des Handschaters scannen.
- Nun können Sie alle Verstellungen der Lehnen oder die Höhenverstellung des Bettes einzeln sperren oder entsperren.


Die App findet Ihr Dali und vernetzt sich mit ihm.





◀ Der Spannungswandler SwitchMode stellt direkt an der Steckdose eine Schutzkleinspannung von 24 Volt her.

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN *Energieeinsparung*

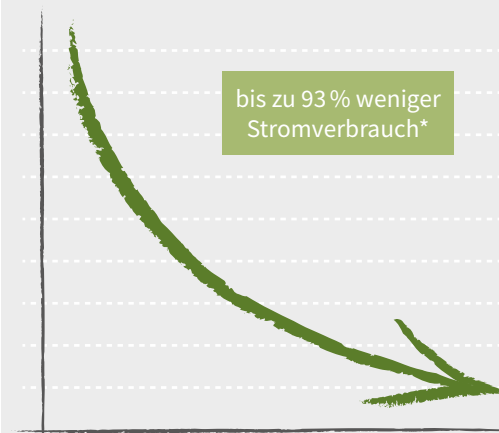

* Im Vergleich zu 230-Volt-Systemen bei ca. 5 Verststellungen pro Tag


24-Volt-Antriebssystem

Das 24-Volt-Antriebssystem von Burmeier bietet einen optimalen Sicherheitsstandard für die häusliche Pflege. Alle spannungsführenden 230-Volt-Komponenten sind außerhalb des Bettes untergebracht. Direkt hinter dem Netzstecker befindet sich ein Gehäuse mit dem elektronischen Spannungswandler **SwitchMode**. Dadurch genießen die Bewohner ein Höchstmaß an Sicherheit.

Solange der Handschalter nicht betätigt wird, ist das Bett stromlos. Der Energieverbrauch sinkt dadurch um bis zu 93 %. Noch mehr Kosten und Aufwand spart das Entfallen der Ableitstrommessungen, zertifiziert durch den **TÜV Rheinland**. Grundsätzlich ist bei Pflegebetten im gewerblichen Einsatz die geforderte Ableitstrommessung alle 2 Jahre durchzuführen. Mit dem 24-Volt-System verlängert sich dieses Intervall so stark, dass über die erwartbare Nutzungsdauer des Pflegebettes hinaus keine weitere Messung notwendig wird. Über die Länge der jeweiligen Nutzungsdauer informiert die Gebrauchsanweisung.

Selbst bei der ersten Inbetriebnahme ist keine Ableitstrommessung erforderlich, denn sie wurde bereits im Werk durchgeführt. Bei der Inbetriebnahme des Bettes muss somit **keine elektrisch unterwiesene Person** beteiligt sein – das spart dem Betreiber weitere Kosten.

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN *Starke Vorteile*

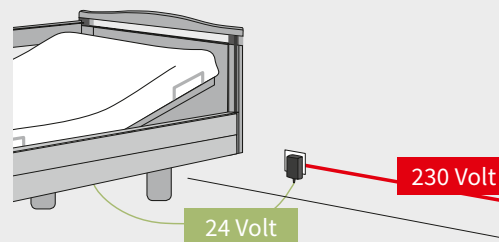

- Schutzkleinspannung ab Trafo an der Steckdose
- keine 230-Volt-Komponenten am Bett
- keine Ableitstrommessung nach Aufbau und über die zu erwartende Nutzungsdauer des Bettes hinaus
- für jedes Bett steht ein Prüfzertifikat zum Download zur Verfügung



Mit dem innovativen 24-Volt-System und dem kabellosen Handschalter genießt der Bewohner im Bett höchste Sicherheit.



Softcover



Die Softcover bestehen aus hochwertigen Stoffen und können zuhause in der **Waschmaschine leicht gereinigt** werden. Sie sind umweltfreundlich nach dem Öko-Tex Standard 100 gefertigt.

Finden Sie Ihre individuellen Softcover mithilfe des **Softcover-Konfigurators** auf unserer Internetseite.

In einem schönen Bett, das zur Wohnungseinrichtung passt, fühlt man sich sofort viel wohler. Mit unseren Softcovern verwandelt sich die Dali-Serie in elegante Designerbetten. Softcover sind **Stoffhüllen**, die sich einfach an den Kopf- und Fußteilen und auch an der Seitensicherung anbringen lassen. Zur Auswahl stehen **7 attraktive Farben**: Petrol, Dunkelblau, Vanilla, Lavendel, Bordeaux, Orange und Braun.



Wohnliche
Eleganz im
„Arminia-Stil“

Die Häupter des Dali lassen sich mit **Holzhauben** verkleiden. Diese hochwertigen Designelemente verbergen die Antriebstechnik des Bettes und sorgen für eine noch wohnlichere und privitere Optik. In der Vorgängerversion der Dali-Serie hieß das Bett mit Holzhauben „Arminia“. Selbstverständlich können auch die Nutzer der neuen Dali-Serie den „Arminia-Stil“ genießen.

Die **Leselampe** sorgt
für angenehmes Licht.

Praktisches Zubehör

Alle Betten der Dali-Serie bieten bereits in der Grundausstattung viel Komfort. Doch mit Original-Zubehör von Burmeier lassen sich Behaglichkeit, Schutz, Mobilisierung und Optik noch einmal erheblich steigern. Die Nutzer der Betten genießen mit Serviertablett und Leselampe einen **angenehmeren Alltag**. Durch einfache Montage und direkten Versand wird das Zubehör zum selbstverständlichen Begleiter.

Freunde und Kenner der Dali-Serie werden nach der Modellvariante **Arminia** fragen, die sich durch wohnliche Holzhauben über den Häuption auszeichnete. Diese Holzhauben sind als Zubehör weiterhin erhältlich.



Die **Bettverlängerung** bietet großen Menschen den benötigten Platz. Sie lässt sich auch nachträglich montieren. In Verbindung mit der Bettverlängerung sind entsprechende Seitensicherungsholme in 220 cm erhältlich.



Der **aufsteckbare Seitensicherungs-holm** erhöht den Seitenschutz um 18 cm.



Die **Metallseitensicherung** ist besonders robust und leicht zu reinigen.



▲ **Nachttische** von Burmeier bieten viel Stauraum und praktische Flächen für Utensilien und Getränke. Hier im Bild das Modell Cherusker mit höhenverstellbarem und schwenkbarem Betttisch.



▼ Der **Bettisch Duo** eignet sich ideal als Abstellfläche und bequemes Lesepult.



▲ Die **Aufnahmeschale** für Brillen, Handys oder den kabellosen Handschalter lässt sich an vielen Stellen einfach anbringen.



◀ Die **Aufstehhilfe** unterstützt den Bewohner dabei, das Bett selbstständig und mühelos zu verlassen.



▲ Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der **Tragetasche** noch leichter transportieren und lagern.



▲ Mithilfe des optionalen **Rastomaten** lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



▲ Das **Serviertablett** wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



▲ **Wandabweisrollen** schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



▲ Das **Füllpolster** lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



▲ Weiche **Schaumlederbezüge** schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



▲ Die **adaptierbare Seitensicherung** für das Dali bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



Die Dali-Serie –
für erholsamen
Schlaf und neue
Lebensqualität

Ausstattungen und Optionen

Modellvariante	Dali	Dali wash	Dali low-entry
Liegefläche	90 × 200 cm, 4-geteilt	90 × 200 cm, 4-geteilt	90 × 200 cm, 4-geteilt
Außenmaße	102 × 218 cm	102 × 218 cm	102 × 225 cm
Höhenverstellung	40 – 80 cm	40 – 80 cm	23 – 63 cm
Sichere Arbeitslast	185 kg	185 kg	175 kg
Fußtieflage	12°	12°	12°
Holzdekor	Buche Natur	Buche Natur	Buche Natur
Gestellfarbe	Topas	Topas	Topas
Kabelloser Handschalter mit selektiver Sperrfunktion	✓	✓	✓
Bereit für Dali-Lock-App	✓	✓	✓
Maschinelle Aufbereitung	–	✓	–
Federholzleisten-Liegefläche	✓	–	–
Metall-Liegefläche	0	✓	✓
Linak-24-Volt-Antriebssystem	✓	✓	✓
Holzhauben für Häupter	0	–	0
Aufrichter	✓	✓	✓
Durchgehende Seitensicherungen aus Holz	✓	✓	✓
Durchgehende Seitensicherungen aus Metall	0	–	0
Aufsteckbarer Holm für Seitensicherungen	0	0	–
Adaptierbare Seitensicherungen	0	–	–
Schaumlederbezug	0	0	0
Mechanische Notabsenkung der Rückenlehne	✓	✓	✓
Wandabweisrollen	0	–	0
Bettverlängerung 20 cm	0	0	–
Leselampe	0	0	0
Serviertablett	0	0	0
Aufstehhilfe	0	–	0
Softcover für Häupter	0	0	–
Softcover für Seitensicherungen	0	0	0
Manuelle Verstellung der Unterschenkellehne (Rastomat)	0	✓	✓
Füllpolster	0	0	0
Aufnahmeschale	0	0	0
Tragetasche für Holme der Seitensicherung	0	0	0

✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich
– = nicht lieferbar

◀ Das Niedrigbett Dali low-entry sorgt für einen erholsamen Schlaf und senkt das Risiko von Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen.

Wertebewahrer Zukunftsgestalter

STIEGELMEYERGRUPPE

Wertebewahrer

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet und ist bis heute familiengeführt. Respekt und Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kunden in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

Zukunftsgestalter

Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheitswesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Austausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im Alltag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

Unsere Expertise

Krankenhaus

Pflegeheim

Pflege zuhause

Komfortbetten

Möbelsysteme

Service



Die Stiegelmeier-Gruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxisgerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln.

- 1900 gegründet und bis heute familiengeführt
- über 1.200 Mitarbeiter weltweit
- Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken
- Produktentwicklung und Produktion in Deutschland
- Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
- internationale Zertifizierungen und Export in mehr als 60 Länder
- Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Südafrika

Unsere Marken





Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270
32791 Lage
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax +49 (0) 5232 9841 - 41
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe



Favoterm AG
Pflegebetten & Hilfsmittel
Unterzil 8
9245 Oberbüren

Tel. 0800 313 444
info@favoterm.ch
www.favoterm.ch

STIEGLMEYERGRUPPE

Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
Bâtiment B · 27 chemin des Peupliers
69572 Dardilly
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

burmeier.com