

senectovia®




# SenPro

senectovia medizinaltechnik

## Produktmerkmale

- Grosszelliges Wechseldrucksystem bestehend aus 17 modular aufgebauten 130 mm hohen Luftzellen aus reinem Polyurethan (PU) und eingenähter 50 mm hoher Schaummatratze.
- 3 statische Zellen im Kopfbereich.
- Angenehmes Mikroklima durch 9 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen) im Rücken- und Gesässbereich.
- Integrierte Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung.
- Antiallergener Bezug aus Soft-Care-Tex™: Atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig, Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert, hoher Liegekomfort durch die sehr weichen und angenehmen Eigenschaften des Bezuges.
- Umlaufender Reissverschluss mit Abdeckung zur sicheren Fixierung des Bezuges und Schutz gegen Verunreinigung der Luftkammern.
- CPR-Lasche zur einfachen und schnellen Entlüftung bei Reanimation nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb der Steuereinheit mit „Soundless-Air-Room-Technologie™“.
- Sichere Verbindung von stahlfederverstärkten Luftzufuhrschläuchen und Motor durch spezielle Konnektoren.
- Einfache Einstellung der Patientengewichte von 40 bis 135 kg mittels Drehknopf.
- Anzeige des Betriebszustandes durch farbige Leuchtdioden.
- Optischer Alarm bei zu niedrigem Druck.
- Luftbefüllt sind die Luftzellen 130 mm hoch. Es ermöglicht ein optimales Einsinken des Patienten.
- Durch die so vergrösserte Auflagefläche erreicht die SenPro eine effektive Druckentlastung.
- Verbesserte elektrische Sicherheit für Patienten und Anwender durch hochwertiges EPR-Netzkaabel.

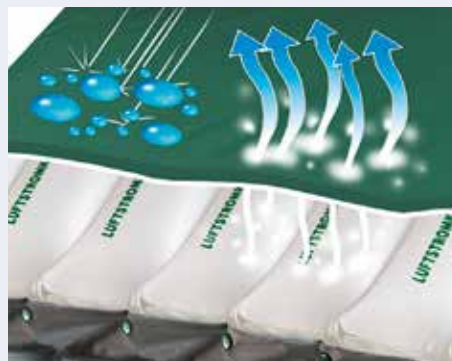

## TECHNISCHE DATEN

### Matratze

Steuereinheit: 230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme: 20 Watt  
Zyklus: 10 Min. 1 in 2

Abmessungen:  
– Aggregat (HxBxT): 250 x 300 x 130 mm  
– Auflage (LxBxH): 2000 x 900 x 180 mm

# SenPro

**Embru-Werke AG**  
Rapperswilerstrasse 33  
CH-8630 Rüti ZH

+41 55 251 12 55  
bfg@embru.ch  
www.embru.ch

**embru**  
möbel ein leben lang